



FC MEDICAL
SOLUTIONS

Prodotto in Cina sotto la supervisione di FC Fotoforniture srl e F.Ili Zambetti srl

Via Papa Giovanni XXIII 27/10 - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG), Italia

Tel. 035 0388638 - Email: info@pec.fornitureconti.it

P.I. 04027030164 - REA: BG-429267 - Cap. Soc. 20.000 € i.v.



MASCHERINE FFP2 CIV

Caratteristiche

Le mascherine FFP2 sono dispositivi di protezione individuale che **proteggono** le vie respiratorie da particelle non oleose come **polvere, polline, polvere industriale, virus dell'influenza** e particelle sottili di inquinamento dell'aria (**PM2.5**) il loro design pieghevole le rende sicuramente **pratiche** e **compatte** rispetto ad altre mascherine.

Informazioni Tecniche

Codice articolo: FFP2 BLU - FFP2 BLACK - FFP2 ROSA

Caratteristiche principali:

Certificate secondo la normativa **EN 149:2001+A1:2009** e marcate **CE**

BFE (efficacia di filtrazione batterica): minimo 94%

Le mascherine sono prive di valvola, con nasello regolabile in lega di alluminio inserito all'interno del tessuto. Presenta elastici da portare dietro le orecchie.
mascherine prive di fibra di vetro, gomma o latex.

Materiale: Cinque strati di tessuto non tessuto composto.

Primo strato: TNT in polipropilene spundbond superficie protettiva esterna, che filtra le particelle più grandi.

Secondo strato: è in tessuto non tessuto ad alta efficienza filtrante, realizzato con la tecnica di fusione melt-blown, che filtra le polveri sottili (PM 2.5).

Terzo strato: è composto da un tessuto filtrante, che ha funzione di isolare i batteri

Quarto strato: Fibre ES etilene-propilene.

Quinto strato: a contatto con il viso, è in tessuto non tessuto elettrostatico e delicato sulla pelle. Funge anch'esso da filtro contro batteri e polveri sottili.

Confezione: 25 pezzi - imbustate singolarmente

Certificazioni

**EN
149:2001
+A1:2009**

Le **mascherine protettive FFP2 BLu, Black e Rosa** sono certificate in base alla normativa **EN 149:2001+A1:2009** (Questa normativa tratta di apparecchi di protezione delle vie respiratorie e semimascherine filtranti contro particelle, stabilendone requisiti di prestazione, prove e marcature. Questa normativa suddivide i dispositivi in **monouso** (nr) e **riutilizzabili** (r). Ognuno di questi dispositivi viene sottoposto a specifici test, come quello relativo ai requisiti di interessamento con la polvere di dolomite (facoltativo per i dispositivi monouso e obbligatorio per quelli riutilizzabili), in base al quale, se positivo, è garantito un buon livello di traspirabilità anche con concentrazioni di polvere molto elevata nell'ambiente. In questo caso i dispositivi devono essere marcati "D"

**DPI
CAT.**

Sono **Dispositivi di Protezione Individuale** di classe III secondo il regolamento **(UE) 2016/425**. Questo regolamento stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione e libera circolazione nell'Unione Europea. Questi dispositivi devono essere consegnati agli utilizzatori solo dopo che gli stessi sono stati formati riguardo il loro corretto utilizzo.



Le **mascherine protettive FFP2 Blu, Black e Rosa** sono marcate **CE** (marchio di conformità europea). Il prodotto rispetta quindi le normative vigenti che governano produzione e immissione dei prodotti nel mercato della comunità europea.





Certificate CN2042163

The management system of

Connexions Technology (Dong Guan) LTD.

No.8, Shenbao Road, Qishi Town, Dong Guan, Guang Dong,
P.R. China

has been assessed and certified as meeting the requirements of

Regulation (EU) 2016/425 Module C2

For the following activities

Manufacture of CTC(logo), CTPL-0020 folded Particle Filtering
Half Mask.


(Note: All products marked CE0598 must have a valid EU type-
examination certificate issued under Module B or a valid EC type-
examination certificate issued under Article 10 of Directive
89/686/EEC.)

This certificate is valid from 29 July 2020
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 1, Certified since 29 July 2020



FINAS
Finnish Accreditation Service
S003 (EN ISO/IEC 17065)

Authorised by

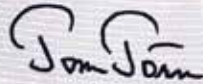

SGS FIMKO OY, Notified Body 0598
Talonkatu 8, FI-00200 Helsinki, Finland
t+358 9 696 301, f+358 9 692 9474, www.sgs.com

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to the General Conditions of
Certification Services available at www.sgs.com/sgs_certification.
Reference is drawn to the Introduction of Safety, Information, and Production
Issues available on the website. The authenticity of this document may be verified at
www.sgs.com/verification or by contacting the client directly.
Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance
of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest
extent of the law.

Certificato



Packaging



Una volta utilizzate, le mascherine vanno gettate nell'indifferenziata, salvo diverse indicazioni



Latex free, prodotto privo di lattice



Sono dispositivo sterile



Dispositivo di protezione individuale monouso



Proteggere il dispositivo di protezione individuale da umidità e agenti atmosferici. Condizione massima di umidità: 80%



Vanno conservate lontano da fonti di calore e luce diretta del sole. La temperatura di conservazione ideale è tra i -5°C e i +40°C



Le mascherine FFP2 pieghevoli sono dotate di foglio informativo da leggere prima di ogni utilizzo.

Marcate CE